


# マイクロ스코プ

ご使用前に、下表より梱包内容をご確認ください。  
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。

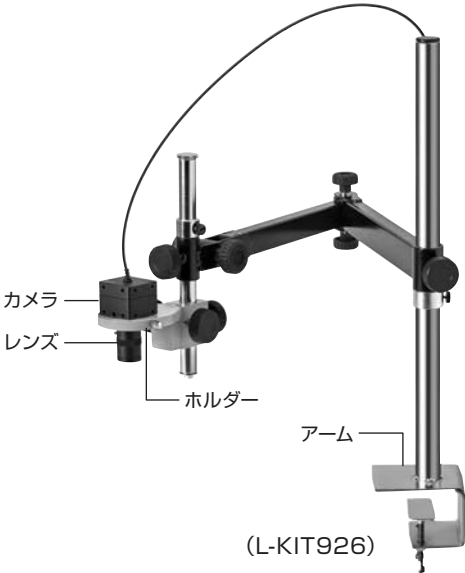

【各種照明】

  
L-711

  
L-703

  
L-711-1

  
L-703-1

【構成】

| 品番       | カメラ   | レンズ   | ホルダー / アーム    | 照明               | 品番       |
|----------|-------|-------|---------------|------------------|----------|
| L-KIT926 | L-836 | L-630 | L-509 / L-503 | —                | L-KIT926 |
| L-KIT927 |       |       |               | L-711 / L-711-1※ | L-KIT927 |
| L-KIT928 |       |       |               | L-703 / L-703-1※ | L-KIT928 |

※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに、L-703-1 クランプセットは L-703 LEDライトに同梱されています。

# 組み立て方法


下記の説明で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

## 1 アームの設置

フレキシブルアームを作業台等に設置します。  
詳細は取扱説明書をご参照ください。

## 2ホルダーの取り付け

右図のようにホルダーを  
取り付けます。

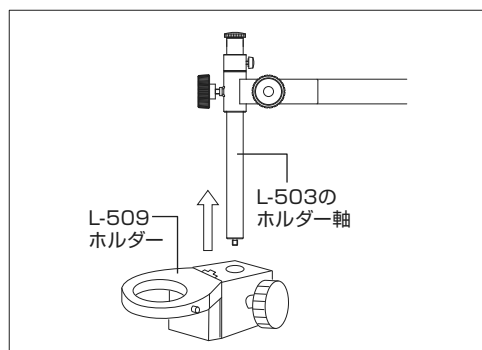

## 3 カメラの設置

カメラの保護キャップを外し、ホルダーにセットします。



## 4 レンズの接続

レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



## 5 照明の取り付け

照明を取り付けます。  
取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

### L-711 LEDライトの取り付けについて

レンズにレンズアダプターを取り付け、レンズアダプターに照明を取り付けてください。

※ レンズアダプターの取付方法はL-630 取扱説明書を参照してください。

※ 写真は入組品とは異なります。



### 技術的なお問い合わせ

#### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp  
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にてご購入  
いただけます。 <https://www.hozan.co.jp/>



マイクروسコープの選定をサポート

**zoom & focus**



Zoom & Focus 検索

### ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024