

チェックセル AQ-201/AQ-201P 用、チェックセル AQ-202/AQ-202P 用

Operation Manual

取扱説明書

本製品は、ハンディ水質計 AQUAB（アクアブ）シリーズ本体の正常動作を確認できるチェックセルです。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書とアクアブシリーズの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
AQ-201/AQ-201P 用と AQ-202/AQ-202P 用は、カラーマーカで識別します。

■中に入っているもの

●080560-2011

- ☐ チェックセル（カラーマーカ 赤） 1コ
- ☐ 保護キャップ 1コ

●080560-2021

- ☐ チェックセル（カラーマーカ 青） 1コ
- ☐ 保護キャップ 1コ

●内容物に破損または欠品があった場合は、お手数ですがお買い上げ販売店までご連絡ください。



■使用方法




注意

本製品をアクアブ本体のユーザー校正モードで使用しないでください。

本製品は、アクアブ本体の「正常動作」を確認するチェックセルです。ユーザー校正モードで使用する
と、アクアブ本体の濃度換算式の設定が変わり、正しい濃度測定ができなくなります。

- ① アクアブ本体のいずれかのキーを 1 回押して、電源をオンにしてください。
- ② アクアブ本体の測定室に何も入れずにセルカバーを閉じて [ZERO] キーを押します。
- ③ ディスプレイに“0mg/L”と“ZERO”が表示されます。
- ④ セルカバーを開けて測定室にチェックセルを挿入します。
イラストのようにチェックセルのカラーマーカとアクアブ本体の
三角マークを合わせて挿入してください。
- ⑤ セルカバーを閉じて [MEAS.] キーを押し、測定値を確認してください。
- ⑥ 測定値や繰り返し測定の再現性が仕様の範囲内であれば、正常です。
 - チェックセルのフィルターが汚れていると測定結果に影響を与えます。
この場合、きれいなラボーパーなどで優しくふき取ってください。
 - 測定値や繰り返し測定の再現性が仕様から外れる場合は、アクアブ本体の修理をご依頼ください。
- ⑦ 使用後は保護キャップを装着しアルミ袋に入れ、高温多湿となる場所を避けて保管してください。
 - チェックセルは 2 年毎の交換を推奨します。期間内でもチェックセルの変色等が見られる場合は交換してください。

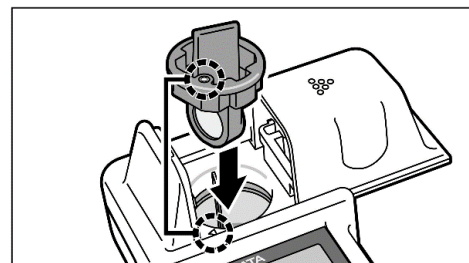

■仕様

品目コード	080560-2011	080560-2021
品名	チェックセル AQ-201/AQ-201P 用	チェックセル AQ-202/AQ-202P 用
カラーマーカ	赤	青
基準濃度	1.35～1.65 mg/L	145～205 mg/L
再現性	±0.01 mg/L	±1 mg/L
チェックセル寸法・質量	30 (W) × 30 (D) × 42.6 (H) mm・5 g	

注) 改良のため形状、寸法、仕様等を機能、用途に差し支えない範囲で変更する場合があります。

柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
☎ 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<https://www.sibata.co.jp>

24.04.15 K (01)