



# GL45

Conversion adapter

# 取り付けるだけ！GL45変換アダプタ


※GL規格：ガラス瓶のキャップに用いられるネジ規格の標準規格です。

## ●使用方法

Mizuho容器のキャップを外し、容器に直接アダプタを取り付けます。

アダプタにGL45規格の廃液キャップやロートを接続することで、労働安全衛生環境を確保できます。

※安全廃液キャップ・ロートは別売りとなります。

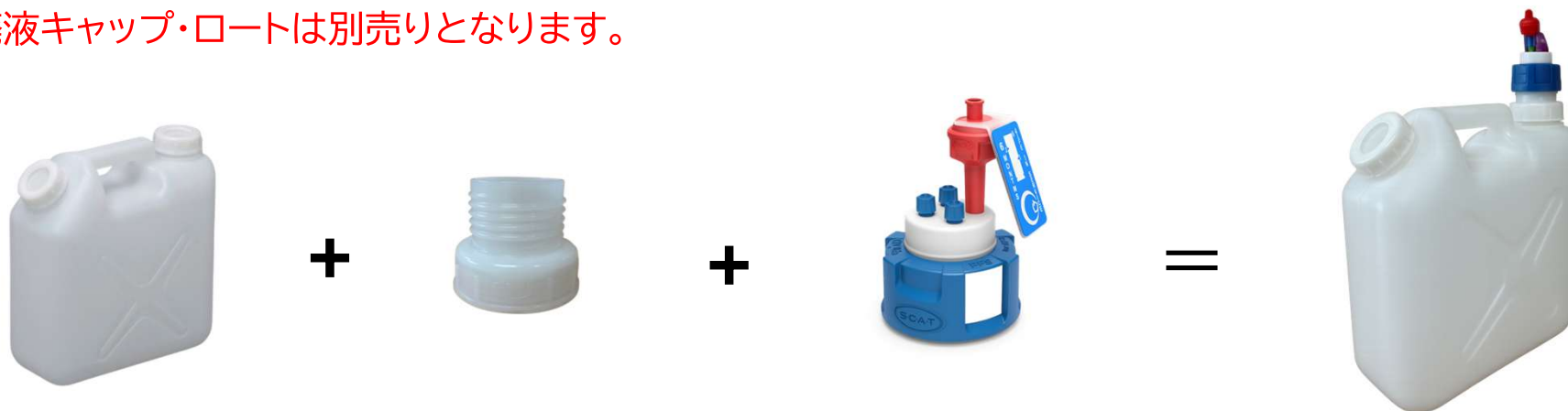

LC廃液(液クロ)の主な使用場所	主な現場使用例
製薬会社の研究所	新薬候補の分析、不純物試験、品質管理
大学・公的研究機関	化学・生物・環境系の研究で成分分析に利用
食品・飲料メーカーの分析室	添加物、残留農薬、品質検査
化学工場・化粧品工場の分析室	原料・製品の純度確認
環境分析会社	水質、土壌、大気試料中の有害物質分析

## ●適合機種一覧



0205 扁平缶ノズル無5L



0206 扁平缶ノズル無10L



0207 扁平缶ノズル無20L



0186 正角10L



0200 正角20L



0193 扁平缶片口20L



0086 広口瓶500ml

0087 広口瓶1L

## ●LC廃液の管理ポイント

- ①安全の為、常時密閉が基本
- ②空気抜きに活性炭フィルターをつけることで、溶媒臭や揮発を防げる
- ③容量は8割未満で交換(膨張や発泡で溢れ防止)

## ●商品情報

型 番	商品名	規格	適合容器(型番)	材質
GL4510	GL45変換アダプタ 5.10L用	GL45 (オネジ)	0205、0206、0186 0087、0086 各色	キャップ:HDPE パッキン:発泡ポリエチレン
GL4520	GL45変換アダプタ 20L用	GL45 (オネジ)	0207、0200、0193 各色	キャップ:HDPE パッキン:発泡ポリエチレン

### 【注意事項】

※mizuho適合容器の専用アダプタとなります。他社商品へのご使用はお控えください。

※GL45規格のみ接続可能です。

※容器が空の状態、ロート等を接続した際に転倒の恐れがございます。(500ml、1000ml)

## ●組合せ方法 ※参考

容器本体	アダプタ 型番	使用環境	接続数 (チューブ)	安全廃液キャップ (SCAT製)	排気フィルター	ロート ※必要な場合
0206 (容量10L)	GL4510	接続するチューブ が少ない	1本	安全キャップ 型番:307923 or 308921	型番:410535 6ヶ月用	型番:350120・450120 安全キャップに接続可能
0207 (容量20L)	GL4520	接続するチューブ が多い	3本	安全キャップ 型番:350045 or 450045	型番:407986 12ヶ月用	型番:318952・318962 安全キャップに接続不可

※安全廃液キャップ等について、  
詳しくは、SCATのHPでご確認ください。

 瑞穂化成工業株式会社

大阪府大阪市平野区加美北9丁目3番6号