

# #2042

## ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚入

NITRILE DISPOSABLE GLOVES



ブルー

粉無  
タイプ指先微細  
エンボス食品衛生法  
適合  
厚生省告示第370号


やわらかく手にフィットし、  
細やかな作業に最適な手袋です。




### 商品情報

#### 脱着手順

【手袋】【着け方】

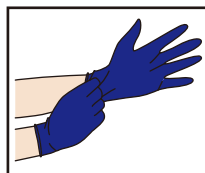


①親指の位置を確認し、手首の部分をつかんで装着する

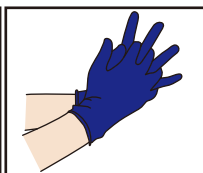


②指先部分をフィットさせる


【手袋】【外し方】

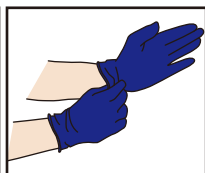


①片方の手袋の袖口をつかむ

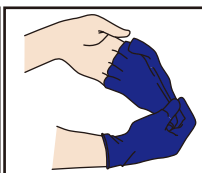


②表面が内側になるように裏返しながら外す

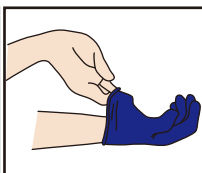

③手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

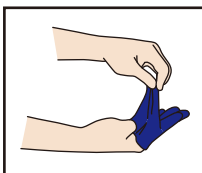

④裏返しながら外す

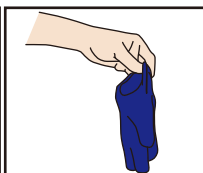

⑤すぐに破棄し、手指消毒を行う

商品特長

- 1 手にぴったりフィット  
ニトリルゴム製なので、柔らかく手にぴったりフィットします。  
長時間の細やかな作業に適しています。
- 2 強度に優れている  
天然ゴムや塩化ビニル樹脂の使いきりタイプと比べて  
耐油性、耐熱性、耐薬品性に優れています。  
また、突き刺しに強く破れにくいです。
- 3 衛生的な手首取り出し口  
手袋の手首側から取り出せるため  
衛生的です。
- 4 食品衛生法に適合  
調理や食品加工にお使いいただけます。  
(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)
- 5 箱のカラー  
遠くから見ても、箱の色でサイズが見分けやすいです。

抗がん剤適合ガイド

ニトリル製医療手袋の標準仕様（ASTM D6978-05）に準拠

薬剤名	結果	薬剤名	結果
カルボプラチン 10 mg /ml シスプラチン 1.0 mg/ml シクロホスファミド 20.0 mg/ml ダガルバジン 10.0 mg/ml ドキシソルピシン塩酸塩 2.0 mg/ml ミトキサントロン 2.0 mg/ml パクリタキセル 6.0 mg/ml イフォスファミド 50.0 mg/ml ビンクリスチン硫酸塩 1.0 mg/ml	240分まで該当せず	エトポシド(トポサル) 20.0mg/ml (20,000ppm) フルオロウラシル 50.0mg/ml (50,000ppm) メトトレキセート 25.0mg/ml (25,000ppm) マイトマイシンC 0.5mg/ml (500ppm)	240分まで該当せず
		カルムスチン 3.3 mg /ml	15.0 分まで該当せず
		チオテパ 10.0 mg/ml	30.1 分まで該当せず

注) 本資料は適合性を保証するものではありません。

商品規格

品番	品名	カラー	サイズ	ケース入数	JANコード	ITFコード
#2042	ニトリル使いきり手袋 粉無 100 枚入	ブルー	SS	100 枚 × 30 箱	4906554174784	14906554174781
			S	100 枚 × 30 箱	4906554174791	14906554174798
			M	100 枚 × 30 箱	4906554174807	14906554174804
			L	100 枚 × 30 箱	4906554174814	14906554174811

◆素材：ニトリルゴム ◆生産国：マレーシア

厚みチャート



- パウダーフリー
- ラテックスフリー
- 指先すべりどめ（エンボス）加工
- 食品衛生法適合
- 抗がん剤適合
- 未滅菌
- 左右兼用

