

小型遠心機

4000~12000rpmタイマー付き BS-LX-120T2Z
5000rpm BS-LX-50T2Z



BS-LX-120T2Z



BS-LX-50T2Z

用途

PCR研究室、微生物学・生物学研究室、化学・薬品研究室、公衆衛生疾病管理、大学病院検査室などで使用します。
1本のチューブ容量が2mL以下の微量遠心に使用します。

LX-120T2Z

・4000~12000回転まで使用可能なため、スピンドウン以外の様々な用途にも使用できます。

LX-50T2Z

・5000回転固定で、スピンドウンに利用できます。

特徴



優れた静音性
 ・ショックアブソーバー付きサスペンションが騒音を低減



優れた操作性
 ・簡単、素早い操作が可能



小型
 ・持ち手ができるレベル



安全性
 ・開いている状態で自動停止する安全インターロック蓋
 ・振動吸収吸盤ゴム脚
 ・水しぶき、漏れを防止する受け皿と蓋


仕様

機種	BS-LX-120T2Z	BS-LX-50T2Z
イメージ		
最大容量	8×1.5/2mL	8×1.5/2mL
回転速度	4,000~12,000rpm	5,000rpm
回転速度設定	ボタン一回:±100rpm、長押し:±1,000rpm	—
速度精度	±5%	±5%
最大相対遠心力	7,325×g	1,270×g
アンバランス保護	有り	—
時間設定範囲	10秒~99分50秒	—
ディスプレイ	有機EL	—
騒音レベル	≤50dB(A)	≤40dB(A)
電源	100~240V、50/60Hz	100~240V、50/60Hz
消費電力	35W	25W
サイズ	152×142×122mm	152×142×122mm
重量	1.2kg	1.2kg
梱包サイズ	265×205×200mm	265×205×200mm
梱包重量	3kg	4kg
付属品	8×1.5/2mLチューブ用円形ローター 1個、PCR8×2列0.2mLチューブ用ローター 1個、0.2mLチューブ用アダプター 8個、0.5mLチューブ用アダプター 8個、24V ACアダプター 1個、取扱説明書	

付属品



8×1.5/2mL
チューブ用ローター

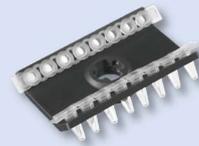

PCR8×2列0.2mL
チューブ用ローター

※チューブは付属していません。



0.5mLチューブ用
アダプター



0.2mLチューブ用
アダプター

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>