

# -30~-15°Cバイオメディカルフリーザー BS-MDW-30XL90



## 前面通気設計

幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。



## コンパクトサイズ

アメリカ障害者法が定める業務用台下冷蔵庫の高さ32インチ未満を満たす設計(812mm)のため、ほとんどの研究室や薬局のカウンター下での使用が可能です。



## 環境に優しい


ノンフロンHC冷媒R290を使用しています。  
エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。



## 安全な保管


複数のアラームと施錠可能な扉により安全に保管ができます。  
内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と温度記録を48時間継続します。

## 構造

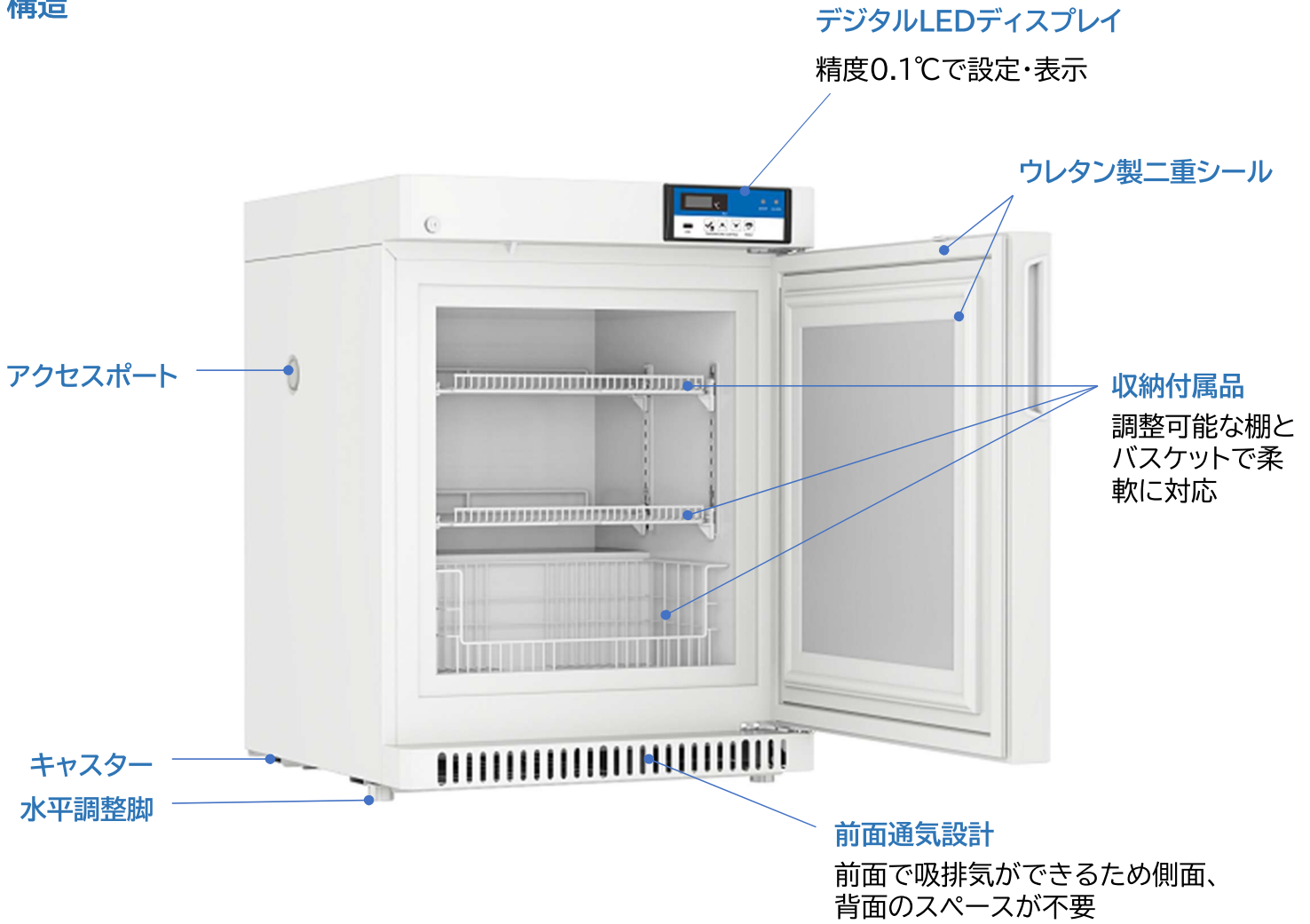


## 冷却・保冷性能

設定温度-30℃までの庫内温度変化

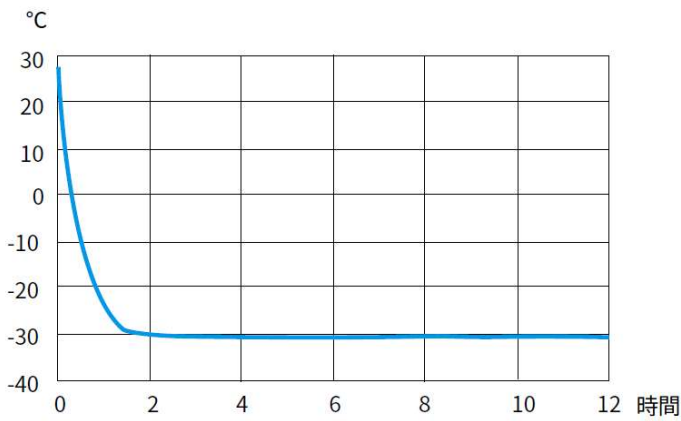

電源停止後の庫内温度変化

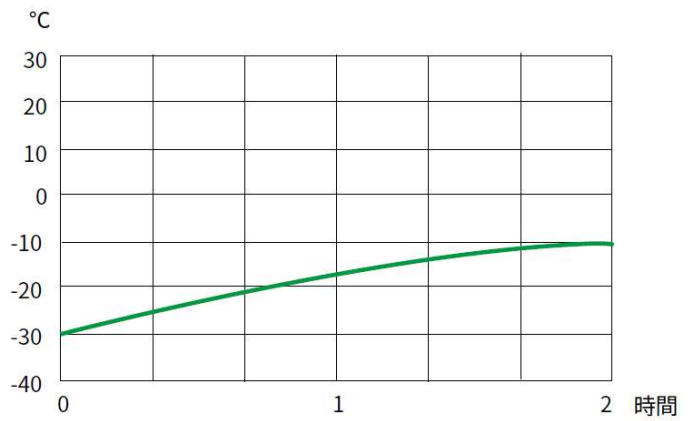

庫内温度均一性





常温(25℃)から  
-30℃までの到達時間



1日あたりの消費電力量

## 仕様

	BS-MDW-30XL90
容量(L)	90
内部寸法(mm)	440×465×480
外形寸法(mm)	600×624×812
梱包寸法(mm)	662×682×892
製品重量(kg)	54
梱包重量(kg)	59
温度範囲(°C)	-30~-15
環境温度(°C)	16~32
騒音(dB(A))	44.1
気候クラス	N(温帯)
制御素子	マイクロプロセッサ
ディスプレイ	デジタル
コンプレッサー数	1個
冷却方式	直冷
霜取り方式	手動
冷媒	ノンフロンHC冷媒(R290)
断熱材厚さ(mm)	80
外装材	塗装鋼板
内装材	アルミニウム板
棚	網棚×2枚、バスケット×1個
アクセス孔	φ25mm×1個
脚	キャスター×2個、水平調整脚×2個
インターフェース	USBポート、無電圧遠隔アラーム接点
温度アラーム	高温/低温、高環境温度
電源アラーム	電源切断、低電池残量
システムアラーム	センサー異常、半ドア、内蔵USBデータロガー異常、データ通信異常
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電力(W)	130
消費電力量(kWh/日)	1.5
定格電流(A)	1.5
付属品	鍵×2、霜取りシャベル、取扱説明書

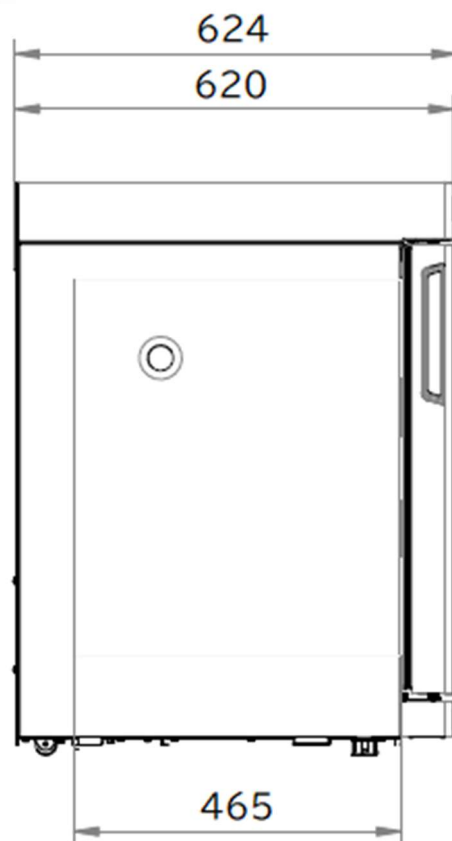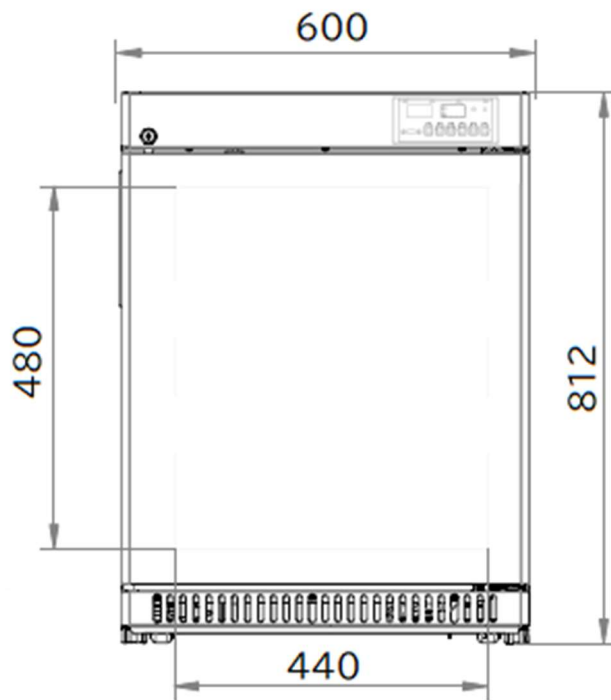

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部  
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002  
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F  
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>